

---

**Sicherheits-  
Infusionskanüle  
EZ Huber™**

---

Die EZ Huber™ ist eine Sicherheitskanüle zur Punktion von implantierten Portsystemen. Ein Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt Anwender vor Infektionen.

[www.pfmmedical.com](http://www.pfmmedical.com)



Die **EZ Huber™** ist eine Sicherheitskanüle zur Punktion von implantierten Portsystemen. Ein Sicherheitsmechanismus reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt Anwender vor Infektionen.

## Ansichten



(1) vor der Benutzung



(2) nach der Benutzung

## Vorteile

### Patentierter Sicherheitsmechanismus

Der patentierte Sicherheitsmechanismus der EZ Huber™ reduziert das Risiko von Nadelstichverletzungen und schützt so vor Infektionen. Die Aktivierung des Sicherheitsmechanismus erfolgt automatisch beim Herausziehen der Kanüle. Ein hörbarer Klick zeigt das geschützte Arretieren der Kanüle im Gehäuse an. Die EZ Huber™ erfüllt die Anforderungen von Abschnitt 4.2.4 der TRBA 250 an Sicherheitsprodukte.\*

\* TRBA 250: Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in der Wohlfahrtspflege. Die vollständigen TRBA 250 stellen wir auf Anfrage gerne zur Verfügung.

### Einzigartige Schutzhülle

Die einzigartige patentierte Schutzhülle umschließt die Kanüle beim Herausziehen aus dem Port und nach der Anwendung vollständig und schützt so vor Kontakt mit Körperflüssigkeiten bzw. Krankheitserregern. Die Schutzhülle vermeidet so effektiv Kreuzkontaminationen.


### Biokompatibles Material

Die Verwendung extrabiokompatibler Materialien, die zudem DEHP- und latexfrei sind, schützt den Patienten zusätzlich. Dennoch ist die Infusion aggressiver Medikamente ohne Materialschädigung möglich.

## Details

- ▶ Die EZ Huber™ ist bis zu einem **Druck von 21 bar/300 psi** für die Hochdruckinjektion geeignet, z. B. bei Kontrastmittelgabe während CT-Untersuchungen (nur in Verbindung mit einem geeigneten Portsystem, z. B. T-Port Contrast von pfm medical).
- ▶ Die sehr griffig gestalteten Halteflügel der EZ Huber™ gewährleisten ein **komfortables Punktieren** und Herausziehen der Kanüle.
- ▶ Die Ausführung der Halteflügel und die transparente Bodenplatte ermöglichen eine **visuelle Inspektion** der Injektionsstelle zur frühzeitigen Erkennung von z. B. Infektionen.
- ▶ Eine **ringförmige** Schaumstoffauflage verhindert beim Patienten Druckstellen und Hautirritationen.
- ▶ Die sehr **flache gestaltete Bauweise** der EZ Huber™ sorgt für sichere Fixierung und damit hohen Patientenkomfort.
- ▶ Die **bewegliche Bodenplatte** kann Längendifferenzen während des Gebrauchs der Kanüle ausgleichen und die Kanüle stabilisieren, was ggf. das Unterlegen einer Komresse erübrigt. Bitte die hausinternen Bestimmungen beachten.
- ▶ Dank **einfacher Handhabung** der EZ Huber™ kann der gewohnte Arbeitsablauf beim Portkanülen-Einsatz beibehalten werden.
- ▶ Die EZ Huber™ mit **Y-Ansatz** ermöglicht das Zuspritzen von Medikamenten ohne Unterbrechung einer laufenden Infusion.

## Bedienung

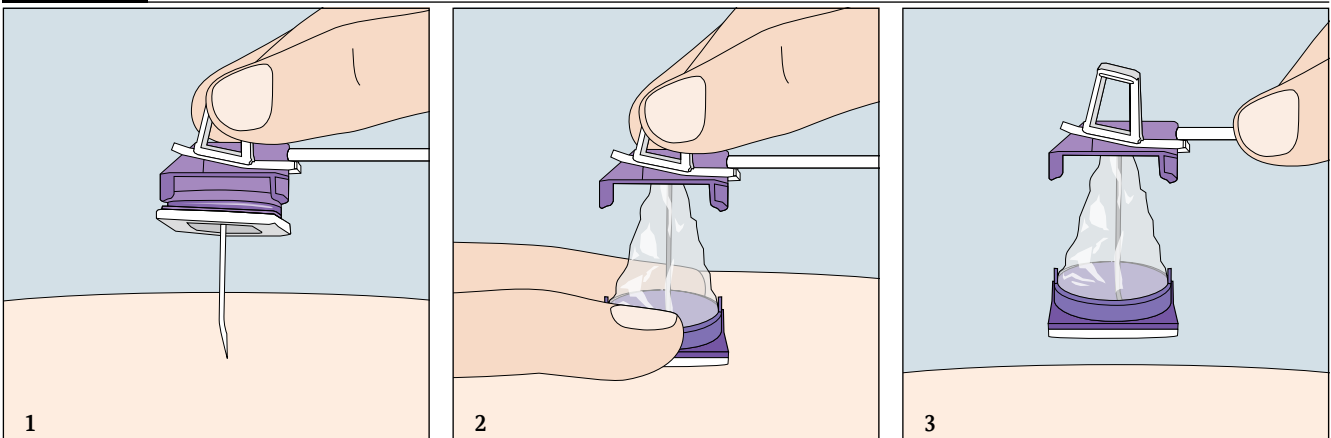

### Einführen

Nadelschutz entfernen. EZ Huber™ mit Daumen und Zeigefinger an den Halteflügeln greifen und senkrecht in den Port einführen.

### Entfernen

Stabilisierung des Ports durch Auflegen zweier Finger auf die Bodenplatte der EZ Huber™. Herausziehen der Nadel durch Greifen und Hochziehen der Halteflügel der EZ Huber™.

### Entsorgen

EZ Huber™ gemäß den hausinternen Richtlinien entsorgen.


## Bestelldaten



## EZ-Huber™ › Ausführung: Verlängerung 180 mm

REF	Größe	Farbkodierung	PZN	VE
SHN19-60*	19 G × 15 mm	■ braun	6945351	25
SHG19-75	19 G × 19 mm	■ braun	9042649	25
SHG19-100	19 G × 25 mm	■ braun	9042655	25
SHG19-150	19 G × 38 mm	■ braun	9042661	25
SHN20-60*	20 G × 15 mm	■ gelb	6945316	25
SHG20-75	20 G × 19 mm	■ gelb	9042566	25
SHG20-100	20 G × 25 mm	■ gelb	9042572	25
SHG20-150	20 G × 38 mm	■ gelb	9042589	25
SHN22-60*	22 G × 15 mm	■ schwarz	6945397	25
SHG22-75	22 G × 19 mm	■ schwarz	9042460	25
SHG22-100	22 G × 25 mm	■ schwarz	9042477	25
SHG22-150	22 G × 38 mm	■ schwarz	9042483	25

\* nicht hochdruckfähig

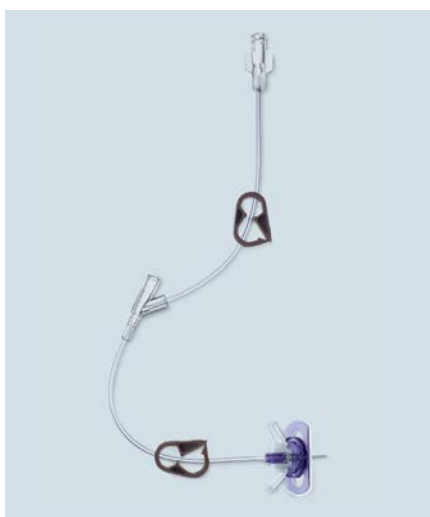

## EZ-Huber™ › Ausführung: Verlängerung mit Y-Ansatz

REF	Größe	Farbkodierung	PZN	VE
SHG19-75Y	19 G × 19 mm	■ braun	9042678	25
SHG19-100Y	19 G × 25 mm	■ braun	9042684	25
SHG19-150Y	19 G × 38 mm	■ braun	9042690	25
SHG20-75Y	20 G × 19 mm	■ gelb	9042603	25
SHG20-100Y	20 G × 25 mm	■ gelb	9042626	25
SHG20-150Y	20 G × 38 mm	■ gelb	9042632	25
SHG22-75Y	22 G × 19 mm	■ schwarz	9042514	25
SHG22-100Y	22 G × 25 mm	■ schwarz	9042520	25
SHG22-150Y	22 G × 38 mm	■ schwarz	9042537	25

## Ansprechpartner

Haben Sie Fragen?  
Unser Customer Solutions Team berät Sie gern.

service@pfmmedical.com

T +49 (0)2236 9641-0

F +49 (0)2236 9641-51

www.pfmmedical.com - Ihre Informationsquelle zu den Produkten der pfm medical ag

**pfm**medical

pfm medical ag  
Wankelstraße 60  
50996 Köln, Germany

Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 13485